

EasyComm è la newsletter che OVERMED ha dedicato a tutti i medici che utilizzano EasyLine

Dalla lunga e comprovata esperienza di EasyNeck[®], è nato **EasySmart[®]**, facendo crescere così la famiglia EasyLine di Overmed.

EasySmart[®], pur non rinunciando alle caratteristiche dell'impianto a una fase, grazie al suo colletto transgengivale di altezza 1,5 mm è indicato per l'utilizzo nei quadranti posteriori e laddove lo spessore della mucosa risulti molto ridotto.


EasySmart[®], il nuovo impianto transmucoso con 2 diametri (Ø4 e Ø4,75mm) e 5 altezze endossee (da 8 a 15 mm)

3 solchi longitudinali a 120° che ridistribuiscono i frammenti ossei durante l'avvitamento in sede



Unica piattaforma implantare ØP 4,8mm

Colletto alto 1,5 mm

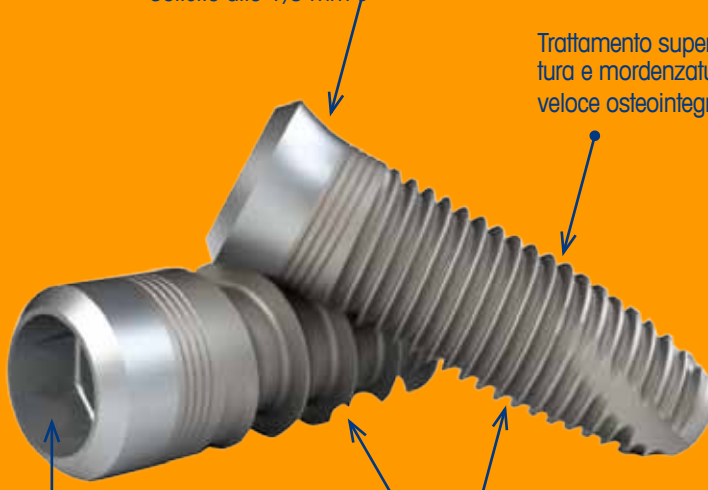

Trattamento superficiale di pallinatura e mordenzatura per una più veloce osteointegrazione

Connessione conica-ottagonale come tutti gli impianti EasyLine

Due profili di filettatura, passo largo e passo fine per adattarsi alle diverse caratteristiche del tessuto osseo

Vuoi maggiori info?

Il nostro Team è a tua disposizione per soddisfare le tue richieste.

Chiama il tuo numero verde:

Oppure scrivici: easycomm@overmed.eu

Numero Verde

800 492 185

Assistenza Dentista

Numero Verde

800 392 315

Assistenza Laboratorio